




signia

Desktop Charger 2.0

Bedienungsanleitung

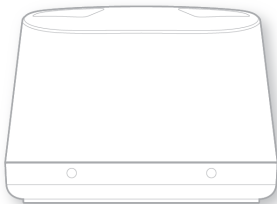

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	4
Bestimmungsgemäßer	
Gebrauch/Zweckbestimmung.....	4
Hinweise für die Verwendung.....	4
Ihr Ladegerät.....	4
Komponenten.....	5
Erklärung der Symbole.....	6
Verwendung des Ladegeräts.....	7
Laden Ihrer Hörsysteme.....	7
Pflege.....	12
Reinigung des Ladegeräts.....	12
Professionelle Pflege.....	13
Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen.....	14

Empfehlung für den Netzadapter.....	16
Fehlerbehebung.....	17

Erste Schritte

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Zweckbestimmung

Dieses Ladegerät ist zum Laden kompatibler Hörsysteme mit eingebauten Akkus (Lithium-Ionen-Akkus) vorgesehen.

Hinweise für die Verwendung


Das Ladegerät ist ein Zubehör des Hörsystems.

Der medizinische Zweck wird durch das Hörsystem realisiert.

Ihr Ladegerät

Ihr Ladegerät ist der Desktop Charger 2.0. Es kann Ihre Hörsysteme durch Anschließen Ihres Ladegeräts an eine Steckdose laden.

Komponenten

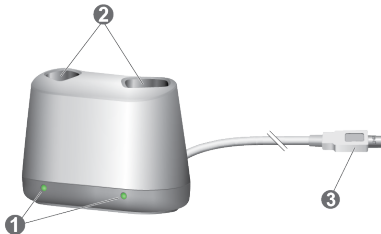

- ① Ladegerätstatus-LEDs
- ② Ladesteckplätze
- ③ Nicht abnehmbares USB-Stromkabel

Erklärung der Symbole

In diesem Dokument verwendete Symbole



Informationen zu potentiell gefährlichen und schädlichen Situationen, denen sich der Anwender bewusst sein sollte.



Informationen zu potentiellen Situationen, die das Gerät und sonstige Gegenstände beschädigen können.



Informationen, die die Erfahrung bei der Verwendung und dem Umgang mit dem Gerät verbessern oder vereinfachen.

Verwendung des Ladegeräts

Laden Ihrer Hörsysteme

Ihre Hörsysteme schalten sich automatisch aus, wenn die Batterie leer ist. Laden Sie die Hörsysteme so bald wie möglich.

Eine vollständige Aufladung Ihrer Hörsysteme dauert ungefähr 4 Stunden.


Nachdem Ihre Hörsysteme für 30 Minuten aufgeladen wurden, können sie bis zu 7 Stunden verwendet werden.

ANMERKUNG

Die Ladezeiten können abhängig von der Verwendung der Hörsysteme und dem Alter der Batterie variieren.

Um Ihre Hörsysteme zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Verbinden Sie das USB-Stromkabel Ihres Ladegeräts mit einem geeigneten Netzadapter.

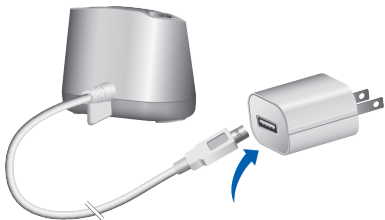

Die LEDs auf dem Ladegerät blinken dreimal, um zu bestätigen, dass das Ladegerät an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

- 2 Platzieren Sie Ihre Hörsysteme korrekt im Ladesteckplatz. Sie können Hörsysteme in einem beliebigen Ladesteckplatz platzieren.



Vergewissern Sie sich, dass der Sockel jedes Hörsystems vollständig in seinen Ladesteckplatz eingesteckt ist. Prüfen Sie die Hörsystem-Status-LEDs. Die LEDs bestätigen die richtige Platzierung.

Die Hörsysteme schalten sich automatisch aus und beginnen mit dem Laden.

Sie können die Hörsysteme im Ladegerät lassen. Das Laden wird automatisch beendet, wenn sie vollständig geladen sind.

Ladestatus

Die folgende Tabelle erläutert den Ladestatus und andere LED-Verhaltensweisen.

LED-Verhalten	Beschreibung
Kein LED-Licht	Ladegerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Kein Hörsystem im Ladesteckplatz oder das Hörsystem ist nicht richtig eingesetzt.
LED blinkt dreimal grün	Ladegerät ist an eine Stromversorgung angeschlossen und bereit zum Laden
LED pulsiert grün	Hörsystem lädt gerade.

**LED-
Verhalten****Beschreibung**

LED leuchtet
dauerhaft grün

Hörsystem ist vollständig geladen.

LED blinkt
zweimal
orange

Zeigt einen Ladegerät-Temperaturfehler
an.

LED blinkt
dreimal rot

Zeigt einen Ladefehler an

Pflege

Reinigung des Ladegeräts



HINWEIS

Verletzungsrisiko durch Stromschlag!

- ▶ Wenn eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.
- ▶ Verwenden Sie nie scharfe/spitze Objekte zum Reinigen des Ladegeräts.

Reinigen Sie das Ladegerät immer mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Wattestäbchen.

Bevor Sie Ihre Hörsysteme im Ladegerät platzieren, wischen Sie die Ladestifte auf den Hörsystemen mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Fett oder Feuchtigkeit zu entfernen.



ANMERKUNG

- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie das Ladegerät nie in Wasser ein.
- ▶ Sterilisieren oder desinfizieren Sie das Ladegerät nicht.

Professionelle Pflege

Ihr Hörakustiker kann eine gründliche Reinigung und Wartung durchführen.

Wenden Sie sich Ihren Hörakustiker, um Empfehlungen zu Wartungsintervallen oder Support zu erhalten.

Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Betriebsbedingungen, Laden mit USB

Temperatur	10–35 °C (50–95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	20–75 %
Luftdruck	700–1060 hPa

Transport- und Lagerbedingungen

Während längerer Transport- und Lagerungszeiten sollten folgende Wertebereiche eingehalten werden:

	Lagerung	Transport
Temperatur	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10–80 %	5–90 %
Luftdruck	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Für andere Teile, z. B. Hörsysteme, können andere Werte gelten.

Empfehlung für den Netzadapter

Die folgende Tabelle erklärt die empfohlene Spezifikation für den Netzadapter.

Eingangsspannung	100–240 V AC
Eingangsstrom	0,5 A
Eingangsfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsstrom	1 A oder mehr
Nennleistung	5 W oder mehr

Fehlerbehebung

LED-Verhalten und mögliche Lösungen

LED-Licht ist aus

Dies kann in folgenden Szenarien passieren:

- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist
- Prüfen Sie, ob die Hörsysteme korrekt ins Ladegerät eingesetzt sind.

Die LED zeigt nur ein paar Sekunden nach dem Anschließen an ein Netzteil oder wenn Sie die Hörsysteme in das Ladegerät einsetzen einen Status an.

LED blinkt zweimal orange.

Das Ladegerät hat die Temperaturgrenze erreicht und kann nicht betrieben werden. Das Laden wird fortgesetzt, wenn das Ladegerät seine Standard-Betriebstemperatur erreicht hat.

LED-Verhalten und mögliche Lösungen

LED blinkt dreimal rot.

Ein Fehler im Ladegerät ist aufgetreten.

- Nehmen Sie die Hörsysteme aus dem Ladegerät heraus und trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit einer anderen Stromversorgung.
- Setzen Sie die Hörsysteme wieder in die Ladesteckplätze ein.

Wenn die LED immer noch rot blinkt:

- Nehmen Sie die Hörsysteme aus dem Ladegerät heraus und trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Hörakustiker.



Hersteller

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Dänemark



www.signia.net



21055873

Document No. 32_D00373363_DE-DE_REV01 | Master Rev01, 05.2026
www.wsaud.com © 07.2026, WSAUD A/S. All rights reserved.